


VX 22
Chart Display

ДИСПЛЕЙ
ОТОБРАЖЕНИЯ
ДАННЫХ



VISIONIX
The Vision of the Future

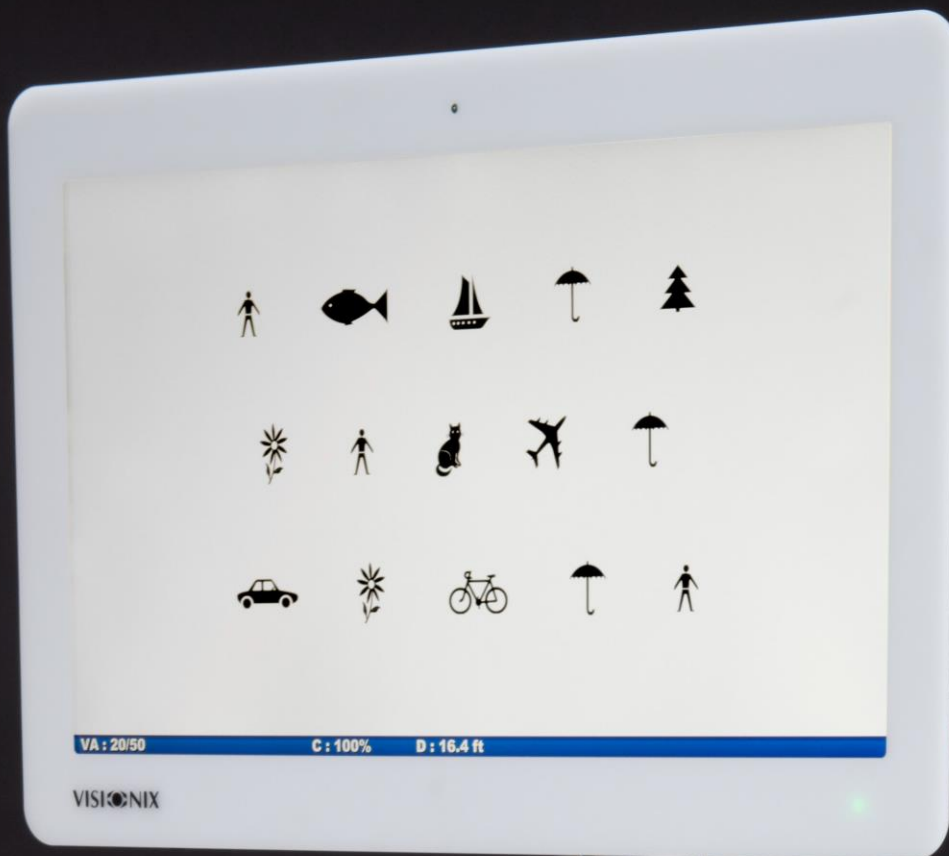

Новый 22-дюймовый ЖК-дисплей с круговой поляризацией является результатом сочетания новейших технологий и большого практического опыта. Данный дисплей разработан для получения оптимальных результатов в смотровом кабинете за счет эргономичного дизайна, обтекаемого стиля и большого количества предусматриваемых в нем тестов

Эргономичный дистанционный пульт управление (радио)

Беспроводной дистанционный пульт управления осуществляет связь на радиочастотах. В результате его диапазон расширен, что позволяет врачу не направлять дистанционный пульт на экран каждый раз при изменении тестов.

Интуитивное дистанционное управление

Наличие возможности заказывать отдельные тесты или группы тестов.

Для конфигурации состава группы у пользователя есть доступ в меню тестов..



Также доступно для модели Acuitab (исх. № 8230-1040-01)

Приложение "планшет" обеспечивает двухстороннюю связь между дисплеем и планшетом (планшет заказывает тест и дисплей посылает информацию о проведенном тесте обратно на планшет).





ДИСПЛЕЙ ТЕСТОВ С КРУГОВОЙ ПОЛЯРИЗАЦИЕЙ

Обтекаемый стиль

Современный дисплей тестов VX22 выполнен в белой акриловой рамке. На лицевой поверхности экрана всего лишь несколько элементов, поэтому дисплей впишется в любой интерьер и удовлетворит требования по соответствующему рефракционному обследованию. Соединительные порты выполнены сбоку дисплея.




Первоклассный экран с круговой поляризацией

Благодаря экрану с круговой поляризацией в тестах по бинокулярному и стереоскопическому зрению вполне возможно эффективно закрыть один глаз, чтобы протестировать другой глаз, независимо от положения пациента.




Точка фиксации (палочка Меддокса)

Она используется для обнаружения возможного косоглазия в раннем возрасте. Эта функция интегрирована в дисплей, что устраняет необходимость в дополнительных принадлежностях.

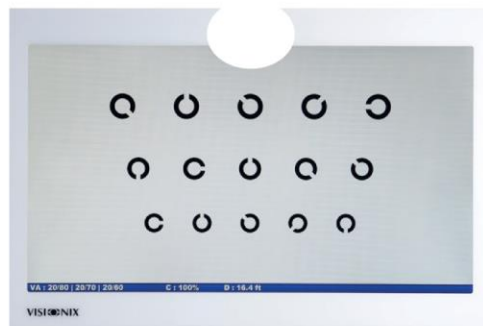

Последовательность оптотипов и тестов

- Буквы, номера, геометрические фигуры, переворачивающиеся E-таблицы,
- таблицы Ландольта, таблицы для детей, тест Шеридана-Гардинера, ГИЭРЛДР (ETDRS).
- Фория-тест
- Тест Парента
- Красный/зеленый баланс
- Бинокулярный баланс (поляризационный)
- Бинокулярный баланс на красном/зеленом фоне (поляризационный)
- Тест Малетта
- МКН тесты (циклофория, стерео...)
- Тест Коуена
- Группа точек
- Перекрестие Джексона
- Тест Ворса
- Тест Шобера
- Тест на контрастную чувствительность Регана и Пелли-Робсона
- Тест на ослабление зрения (поляризационный)

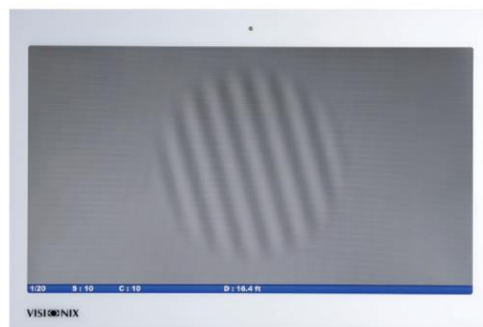

- Тест на совпадение, анизейкония (поляризационный)
- Тест поперечной оправки (поляризационный)
- Тесты Ишихары
- Сетка Амслера



Технические спецификации



Высота	385 мм
Ширина	590 мм
Глубина	40 мм
Вес	11 кг

- Разрешение 1920x1080
- Яркость: 230 кд/м²

Стойки и монтажные опоры



Исх. №	7191013 Напольная стойка (опционально)	7610022 Настольный штатив (опционально)	8230-5041-07 Настенное крепление VESA (стандартное)
--------	--	---	---



КОМПАНИЯ "ЛЮНО ТЕКНОЛОДЖИ ОПЕРЕЙШНС" (LUNEAU TECHNOLOGY OPERATIONS)
ФРАНЦИЯ, 27340, ПОН-ДЕ-Л'АРШ, ул. Роже Бонне, 2 (2 Rue Roger Bonnet-27340 PONT DE L'ARCHE - FRANCE). Тел. + 33 232 989 132
- Факс + 33 235 020 294 - www.visionix.com

Компания "Люно Текнолджи" (Luneau Technology)